

# Prise en main

Ce carnet note les glycémies, calcule les moyennes et prépare un rapport pour le médecin.  
Tout reste sur le téléphone : rien n'est envoyé sur internet.

## 1 Installer l'application sur l'écran d'accueil

Ouvrez l'adresse du carnet dans Chrome, puis le menu en haut à droite.

Choisissez « Ajouter à l'écran d'accueil » : une icône en forme de goutte rouge apparaît.

Ouvrez toujours l'application par cette icône. Elle fonctionne même sans connexion.

## 2 Régler les objectifs donnés par le médecin



Onglet Réglages, en bas à droite.

Cible basse et cible haute : la plage à atteindre, par exemple 80 et 150.

Seuil d'hypoglycémie : en dessous, la mesure s'affiche en rouge, par exemple 70.

Seuil d'alerte haute : au-delà, la mesure repasse en rouge, par exemple 250.

Ces quatre valeurs colorent toutes les mesures et se retrouvent dans le rapport.  
Terminez par « Enregistrer les réglages ».


## 3 Enregistrer le traitement habituel

Toujours dans Réglages.

Pour chaque ligne : le nom, la dose, le type — médicament, insuline rapide ou lente — puis les moments de prise.

Matin 4 h – 11 h    Midi 11 h – 16 h  
Soir 16 h – 21 h    Coucher 21 h – 4 h

Le crayon bleu modifie une ligne,  
la croix rouge la supprime.

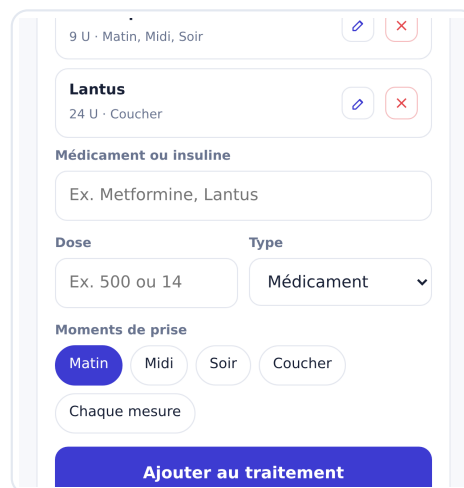

# Au jour le jour

## 1 Enregistrer une glycémie

Touchez le bouton bleu + en bas à droite.

1. Tapez la valeur. Elle se colore aussitôt selon la zone atteinte, et le libellé « Dans la cible » s'affiche en dessous.
2. L'heure se remplit toute seule, et le contexte — à jeun ou avant repas — se déduit de cette heure.
3. Les traitements prévus à ce moment apparaissent déjà cochés. Les boutons – et + ajustent la dose d'insuline. Décochez une ligne si elle n'a pas été prise.

4. Touchez « Enregistrer la mesure ».

Les glucides et la note sont facultatifs.

## 2 Retrouver les mesures dans le Journal

Toutes les mesures, groupées par jour, de la plus récente à la plus ancienne.


La barre de couleur à gauche rappelle la zone atteinte.

Les filtres du haut n'affichent que les mesures à jeun, ou celles d'avant repas.

Seule la dernière mesure enregistrée peut être corrigée : elle porte un crayon. Touchez-la pour modifier la valeur ou la supprimer.

# Comprendre les graphiques

## 1 La dernière glycémie

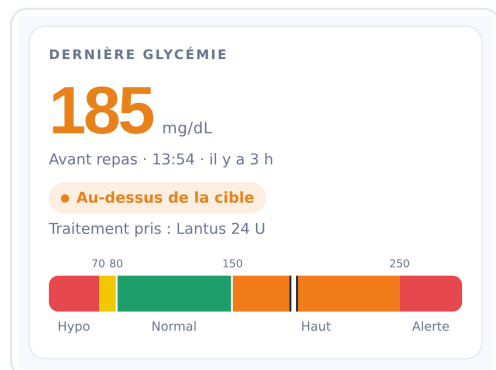

Le grand chiffre est la dernière mesure, colorée selon sa zone.

En dessous : l'heure, le contexte et le traitement pris avec cette mesure.

La barre montre les cinq zones. Les nombres du dessus sont vos seuils, les mots du dessous nomment chaque zone.


Le trait noir indique où se situe la mesure.

## 2 Répartition des glycémies


Une colonne par zone. La hauteur et le pourcentage indiquent la part des mesures tombées dans cette zone.

Sous chaque nom figurent les bornes, reprises de vos réglages.

L'objectif habituel est d'avoir au moins 70 % des mesures dans la zone Normal. Un tiret signifie : aucune mesure.

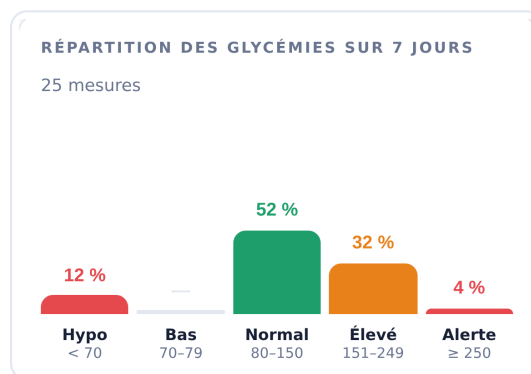

## 3 Glycémie moyenne sur la période

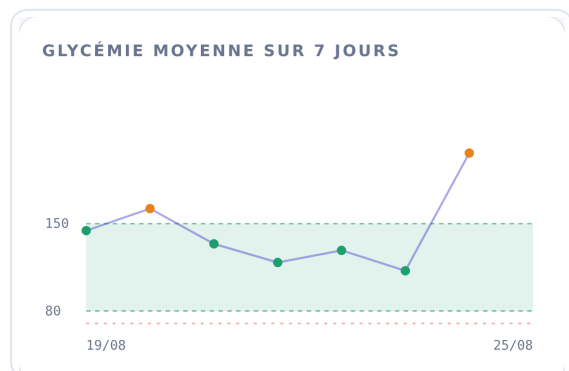

Un point par jour : la moyenne de toutes les mesures de la journée.

La bande verte est votre plage cible, la ligne rouge le seuil d'hypoglycémie.


Les points sont colorés selon leur zone. L'axe couvre toute la période choisie, même les jours sans mesure.

## 4 Glycémies moyennes de la journée

La moyenne de chaque moment de la journée, sur toute la période.

C'est le graphique le plus utile au médecin : il montre à quelle heure la glycémie décroche — au réveil, après le déjeuner, en soirée ou la nuit.

Le nombre de mesures figure sous chaque nom : une moyenne calculée sur deux mesures vaut moins qu'une sur trente.

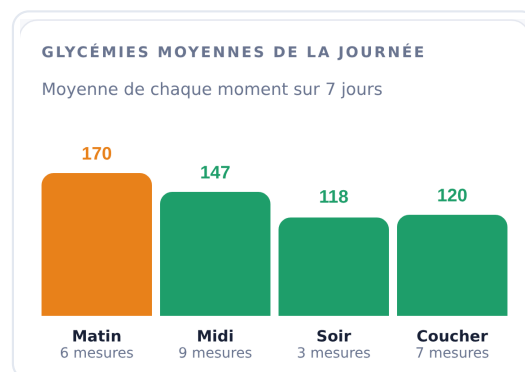

# Le rapport et la sauvegarde

## 1 Envoyer le rapport au médecin

Onglet Rapport, en bas.

Choisissez d'abord la période. 90 jours correspond à la durée que couvre l'HbA1c.

« Envoyer le PDF » ouvre le partage : WhatsApp, e-mail, ou toute autre application. Le document tient sur une page A4 et contient les mêmes graphiques que l'écran, plus le traitement habituel.

« Imprimer » sort le même document.

« Afficher à l'écran » le montre avant envoi.

## 2 Sauvegarder — le geste le plus important

Les mesures vivent dans le navigateur du téléphone. Effacer les données du site, ou changer d'appareil, les supprime définitivement.

Tous les 3 jours, un encadré apparaît en haut de l'écran Suivi : touchez « Sauvegarder ».

Un fichier est téléchargé — envoyez-le sur WhatsApp ou rangez-le dans Drive.

Pour tout récupérer sur un téléphone neuf : Réglages, puis « Restaurer une sauvegarde ». Mesures, seuils et traitement reviennent d'un coup.

### À retenir

La restauration remplace tout le carnet : sauvegardez avant d'importer un autre fichier.

Une valeur sous le seuil d'hypoglycémie ou au-delà du seuil d'alerte demande d'appliquer la conduite à tenir de l'équipe soignante, et de la contacter si cela se répète.

## 3 En cas de doute

Une valeur fausse ? Seule la dernière mesure est modifiable, depuis le Journal.

Un traitement a changé ? Réglages, Traitement habituel, crayon bleu. Les mesures déjà enregistrées gardent la dose réellement prise.

Le carnet semble vide ? Vérifiez que vous avez ouvert l'icône de l'écran d'accueil.